

DAS EINZIG VARIO

*IN DER EXTRAKORPORALEN
STOSSWELLENTHERAPIE (ESWT)*



GEZIELTER. SCHONENDER. EFFEKTIVER.

**WAVE
VARIO**

MIT INNOVATIVER

VARIO LOGIC
TECHNOLOGIE (VLT)



Medi-Manage
Innovation



Medi-CENT
Innovation

GEBÜNDELTE KOMPETENZ, DIE INNOVATIVE WELLEN SCHLÄGT ...

Das WAVE VARIO ist ein hoch energetisches, zukunftsweisendes, radiales Stoßwellengerät!
Mit diesem System ist eine gezieltere, schonendere und effektivere Schmerzbehandlung unterschiedlichster Indikatoren möglich:

Das WAVE VARIO kombiniert die Aspekte Fortschritt, Präzision und Qualität "Made in Germany" in idealer Weise. Das Resultat dieser optimal genutzten Synergien ist ein System, von dem auch Sie profitieren werden. Denn ganz gleich, ob Sie bereits Erfahrung mit der hoch energetischen Stoßwellentherapie haben oder sich jetzt erst mit dieser Behandlungsform beschäftigen:

WAVE VARIO wird Ihnen neue, schlagkräftige Impulse für Ihre Praxis bringen. Aber am besten überzeugen Sie sich selbst durch eine unverbindliche Probevorstellung.



■ 10,4" Farb-Touchscreen




■ Anschlüsse frontseitig für einfachen Zugriff



■ Individuelle Einstellmöglichkeiten



■ Einfachste Menüführung

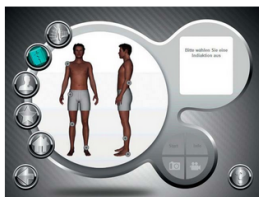

■ Mit Behandlungsvorschlägen zu den gängigen Indikationen



■ Triggerpunktbehandlung



■ Bedienerfreundliche Patientenverwaltung



■ Mit übersichtlicher Datenbank



EXTRAKORPORALE SCHMERZBEHANDLUNG UND TRIGGERPUNKT-THERAPIE

Um Wellenlängen schonender und effektiver


WAVE VARIO ist eine echte Innovation in der extrakorporalen, hoch energetischen Stoßwellentherapie. Der Nutzen für Anwender und Patienten liegt unter anderem in der einzigartigen VARIO LOGIC TECHNOLOGIE.

Aufgrund der intelligent gesteuerten Modulation von Stoßwellenintensität und Behandlungsfrequenz ist die Therapie mit der VARIO-Stoßwelle wirksamer und zugleich schonender, als dies bei vergleichbaren Techniken der Fall ist. Durch die alternierende Energie und Frequenz, die während eines Behandlungszyklus appliziert werden, können sich die Zellen bereits während der Behandlung immer wieder regenerieren. Die Zellzerstörung, die sich bei einem Dauerbeschuss durch die lineare Anwendung ergeben kann, wird dadurch vermieden.


Auch bei der Triggerpunkt-Stoßwellentherapie erzielt WAVE VARIO beste Ergebnisse, da sich Intensität, Leistung und Pulsfrequenz der VARIO-Stoßwelle einfach auf die erforderliche Indikation anpassen lassen.

INTELLIGENTE VARIATION MACHT DEN UNTERSCHIED


Linearer Modus

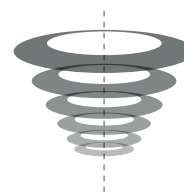


herkömmliche Behandlung
mit gleichförmiger
Intensität und Frequenz

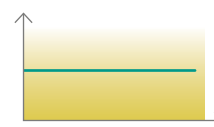


Sägezahnförmiger VARIO-Modus

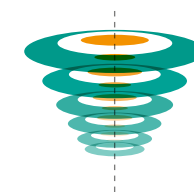


zur Behandlung mit einer
voreingestellten alternie-
renden Veränderung der
Intensität und der Frequenz

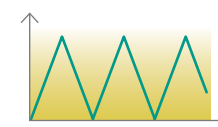

Pulsförmiger VARIO-Modus

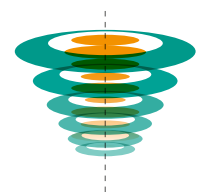

zur Behandlung mit einer
voreingestellten stufen-
förmigen Veränderung der
Intensität und der Frequenz

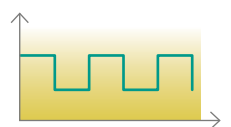

ARGUMENTE FÜR DIE BEHANDLUNG MIT HOCH ENERGETISCHEN STOSSWELLEN:

- Effektive, schonende und ambulante Schmerzbehandlung
- Schneller Therapieerfolg ohne OP, Spritze oder Medikament
- Weitgehend nebenwirkungsfrei und jederzeit wiederholbar
- Positive Beeinflussung der Zellregeneration, der Dichte von schmerzhaften Nervenfasern sowie der Zusammensetzung des Bindegewebes
- Gezielte Aktivierung der Selbstheilungskräfte
- Stimulation des Stoffwechsels
- Individuell nach Indikation und Schmerzempfindlichkeit des Patienten steuerbar

SCHMERZTHERAPIE MIT DER STOSSWELLE – DIE ALTERNATIVE ZUR OP

Je nach Indikation wird die Energie in Form von hoch energetischen radialen Stoßwellen gezielt in jene Körperregionen geleitet, in denen sich der Schmerz besonders bemerkbar macht. Mittels anwendungsspezifischen Applikatoren wird die Energie über die Haut auf die darunter liegenden Gewebeschichten übertragen.

Die Stoßwellentherapie mit WAVE VARIO ist jederzeit wiederholbar und kann problemlos von medizinisch geschulten Fachkräften angewandt werden. Sie ist nahezu nebenwirkungsfrei und erspart Ihren Patienten langwierige medikamentöse Behandlungen – oftmals sogar Operationen, die bisher als unvermeidlich galten.


INDIKATIONEN EXTRAKORPORALE STOSSWELLENTHERAPIE (ESWT)

- Kalkschulter
(Tendinosis calcarea)
- Fußsohlenschmerz, Fersensporn
- Tennisellenbogen
(Epicondylitis humeri radialis)
- Golferellenbogen
(Epicondylitis humeri ulnaris)
- Achillessehnenbeschwerden,
Achillodynie
- Sehnenansatzschmerzen, z.B.
an der Kniescheibensehne
(Patellaspitzensyndrom)
- Sehnenreizungen am Rollhügel
der Hüfte usw.
- Verzögerte
Knochenbruchheilung
(Pseudarthrosen)
- Chronische Nacken-, Schulter-
und Rückenbeschwerden



INDIKATIONEN TRIGGERPUNKT- STOSSWELLENTHERAPIE

- Verspannungen durch schmerzende
Muskelknötchen (Trigger)
- Nacken- und Schulterschmerzen
- Rückenschmerzen
- Ischias- und
Gesäßschmerzen

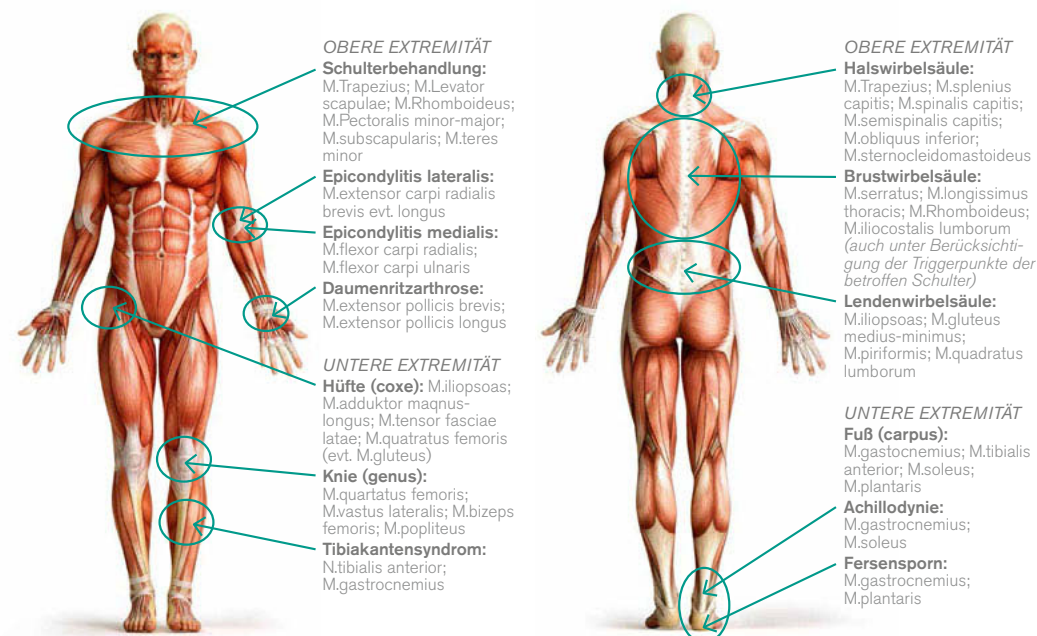

IHRE VORTEILE IN DER PRAXIS:

- Schneller Therapiestart
- Großes Indikationsspektrum
- Jederzeit wiederholbar, da nahezu frei von Nebenwirkungen
- Hoch energetisch mit großer Eindringtiefe
- Mobil und sofort einsatzbereit
- Neue wirtschaftliche Impulse für Ihre Praxis
- Anschaffung wahlweise per Leasing- oder Kaufoption



Gerätewagen mit großen Rollen für optimale Bewegungswege, inkl. Halterung für das Handstück, Kabelaufwicklung, Halterung für eine Gelflasche, integrierter **Zubehörkoffer**.



Abbildungen zeigen
Ausstattungsvarianten

VORTEILE DES GERÄTES:

- Einzigartige VARIO LOGIC TECHNOLOGIE
- Intuitives Bedienkonzept via 10,4-Zoll-Touchscreen
- Vorprogrammierte VARIO-Modi oder eigene Einstellungen möglich
- Verschiedene, individuell auf die Indikationen abgestimmte Applikatoren
- Ergonomisches, leichtes Handstück
- 25 Intensitätsstufen (Anpassung der Energie je nach Schmerzempfindlichkeit)
- Pulsmodus 1–12 Hz (Anpassung der Stoßwellenfrequenz je nach Indikation)
- Schneller Zugriff über leicht pflegbare Patientendatenbank
- Behandlungsvorschläge für einzelne Indikationen via medizinischem eBook mit Anwendungsbeispielen
- Modernes und anspruchsvolles Design
- Als mobile Einheit mit Gerätewagen oder kompaktes Tischgerät
- Dank Ferndiagnose-Tool per Remote-Verbindung zur schnellen und kostengünstigen Anwendungs- und Service-Unterstützung vor Ort



EINFACHE BEDIENBARKEIT ...



... ÜBER DEN 10,4 ZOLL TOUCHSCREEN ...



... FÜR DIE OPTIMALE BEHANDLUNG

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

Abmessungen	Stromversorgung
Höhe: 20 cm (inkl. Füße)	Spannungsbereich: 110–240 V
Tiefe: 30 cm	Frequenz: 50 / 60 Hz
Breite: 33,5 cm	Abgesichert mit: 2 St. 1A-Sicherungen
Gewicht: 10,5 kg	Anwendungsdruck: bis 6 bar
Abmessung Bildschirm: 10,4"	Impulsfrequenz: 1–12 Hz
	Intensitätsstufen: 1–25

Garantierte Schusszahl von 1,5 Mio. Stößen

Wichtiger Hinweis: Der Inhalt dieser Broschüre dient lediglich der Information und ersetzt keine Gebrauchsanweisung. Trotz aller Sorgfalt kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der in ihr enthaltenen Informationen und Empfehlungen keine Haftung übernommen werden. Nach Redaktionsschluss dieser Broschüre können sich am Produkt Änderungen ergeben haben. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Informieren Sie Ihre Patienten über die wirksame und schonende Stoßwellentherapie mit WAVE VARIO. Gerne unterstützen wir Sie mit weiterem Material wie Plakaten und Patienteninformationen.

**Sie möchten WAVE VARIO unverbindlich testen?
Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie Ihren Wunschtermin.**



WAVE
VARIO



Medi-Manage Innovation GmbH
Göttelmannstraße 48
D - 55131 Mainz

+ 49 (0) 6131 58 88 70
+ 49 (0) 6131 58 88 720

info@medi-manage.de
www.medi-manage.de



Medi-CENT Innovation AG
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel

+41 (0) 61 58 81 500
+41 (0) 61 58 81 509

info@medi-cent.ch
www.medi-cent.ch